



hattrick

SAVINO MASAJ KOLTUĐU KULLANIM KILAVUZU

Bu talimatları saklayınız.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanım öncesinde bu ürünün doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen bu kullanımtalimatını dikkatlice okuyunuz. Bazı önemli güvenlik uyarılarına daha fazla dikkat ediniz ve daha sonra kullanmak üzere bu kitapçığı uygun şekilde muhafaza ediniz. Not: Şirketimiz herhangi bir şekilde önceden haber vermeksizin bu ürünün tasarımını ve açıklamasını değiştirme hakkında sahip bulunmaktadır. Lütfen bu ürünün gerçek rengine bakınız.

İçindekiler :

Güvenlik ve bakım

Parçaların ismi ve fonksiyonu

Fonksiyon & Etkinlik

Kullanım yöntemi

Ürün özellikleri

Güvenlik ve bakım

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI.

Çocukların, bu ürünün hareketli parçalarına dokunmalarına izin VERMEYİNİZ.

Lütfen bu ürüne uygun iyi bir şekilde topraklaması yapılmış güç kaynağı kullanınız.

Yaralanmalardan veya ürüne zarar gelmesinden kaçınmak için kullanım sonrasında veya temizlik öncesinde lütfen fişini çekiniz.

Lütfen bu ürünü bu kullanım kitapçığına göre kullanınız.

Tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.

Bu ürünü açık alanda kullanmayınız.

Kullanım öncesinde lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunda listelenmeyen her türlü diğer kullanım yasaklanmıştır.

Her seferinde 20 dakikalık kullanım tavsiye edilmektedir.

Derisi kesik ya da hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Örtüsü ya da derisi hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Radyatör deliği örtülü ya da engellenmiş olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Ürüne lütfen herhangi bir şey damlatmayınız.

Ürünü kullanırken lütfen uyumayınız.

İçkiliyken ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde lütfen ürünü kullanmayınız.

Yemek yedikten sonraki bir saat içinde lütfen ürünü kullanmayınız.

Yaralanmaları önlemek için lütfen masaj fonksiyonunu çok kuvvetli ayara getirmeyiniz.

2. Kullanım çevresi

Lütfen bu ürünü banyo gibi, yüksek sıcaklık ve nemin olduğu bir ortamda kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü, ortam sıcaklığının ciddi bir biçimde değiştiği ortamlarda hemen kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü ağır tozlu veya kostik ortamlarda kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü yeterli alan ya da iyi havalandırma olmayan bir yerde kullanmayınız.

3. Bu ürünü kullanması uygun olmayan kişiler.

Kemik erimesinden muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Kalp hastalıklarından muzdarip ya da kalp cihazı gibi elektronik tıbbi ekipman taşıyan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Ateşten muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Hamile veya adet dönemindeki kadınların bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Sakatlığı ya da cilt hastalıkları olan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

14 yaşın altında çocukların veya denetim altında olmadan mental olarak dengesiz kişilerin bu ürünü kullanmalarına müsaade edilmemektedir.

Doktor tarafından kendisine istirahat etmesi söylenen ya da kendisini iyi hissetmeyen kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Vücutları ıslak olan kişilerin bu ürünü kullanmaları yasaktır.

Bu cihazın ısıtılış bir yüzeyi bulunmaktadır. Isıdan etkilenmeyen kişilerin bu cihazı kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Güvenlik ve bakım

4. Güvenlik

Voltajın, bu ürünün özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Fişi çekmek için ıslak elinizi kullanmayınız.

Elektrik çarpmasını veya bu ürüne zarar gelmesini önlemek adına ürünün içine su kaçırmayınız.

Bu ürünün kablolarına zarar vermeyiniz ya da devresini değiştirmeyiniz.

Anahtar ve fiş gibi elektrikli parçaları temizlemek için ıslak bez kullanmayınız.

Kesilen elektriğin aniden gelmesi durumunda yaralanmadan kaçınmak için elektrik kesik olduğunda bu üründen uzak durunuz.

Anormal bir şekilde çalışması durumunda bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen derhal yerek acentesine danışınız.

Kendiniz iyi hissetmediğinizde bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen bir doktora başvurunuz.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kendilerine nezaret edilmedikçe ya da cihazın kullanımıyla ilgili olarak talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) yetersiz fiziki duyuşal ya da mental kapasiteye sahip ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılmak

üzere tasarlanmamıştır.

Cihazla oynamalarının sağlanması için çocuklara nezaret edilmesi gerekmektedir.

Elektrik kablosunun hasarlı olması durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

5. Bakım

Bu ürünün bakımının, bunun için atanmış acentelerce yapılması gerekmektedir, kullanıcıların kendi başlarına cihazı sökmeleri ya da bakımını yapmaları yasaklanmıştır.

Kullandıktan sonra, lütfen elektriği kesmeyi unutmayınız.

Soketlerinin gevşek olması durumunda bu ürünü kullanmayınız.

Bu ürünün uzun süre kullanılmadan bırakılacak olması durumunda, lütfen kablolarını kıvrınız ve bu ürünü kuru ve toz içereyen bir ortamda muhafaza ediniz.

Bu ürün yüksek sıcaklar altında ya da ateşe yakın bir yerde muhafaza etmeyiniz ve uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız.

Çıkarılabilir kablonun/elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir

Bu ürünü lütfen kuru bezle temizleyiniz. Tiner, benzin ya da alkol kullanmayınız.

Bu ürünün mekanik parçaları özel olarak tasarlanıp yapılmış olup, özel olarak bakımı yapılması gerekmemektedir.

Bu ürünü itmek için sivri eşya kullanmayınız.

Bu ürünü düz olmayan zeminde tekerlekleri üzerinde hareket ettirmeyiniz ya da çekmeyiniz, hareket ettirilmeden önce kaldırılması gerekmektedir.

Lütfen aralıklı olarak kullanınız; bu ürünü uzun süre boyunca devamlı olarak kullandırtmayınız.

6. Sıradan arızaların giderilmesi

Kullanım esnasında motor ses çıkarıyorsa bu doğal hareket sesidir.

Kontrol cihazı normal şekilde çalışmıyorsa, fiş ve prizini sağlam bir şekilde bağlı olup olmadıklarını kontrol ediniz ve anahtarın açık konumda olduğundan emin olunuz. Nominal çalışma süresi dolduğunda ürün uzun süre devamlı olarak çalıştırılırsa, sıcaklık koruyucusu ürünün otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır, bir saatlik dinlenmenin ardından ürün tekrar kullanılacaktır.

Parçaların ismi ve fonksiyonu

1. Yastık altlığı
2. Kontrol cihazı
3. Kolçak
4. minderler
5. Baldır desteği
6. ayak akupunktur masaj noktalarının tabanları
7. Arka altlık
8. Çay koyma yeri
9. arka kapak
10. Vantilatör
11. Kontrol cihazı desteği
12. mp3
13. Kasnak
14. Elektrik kablosu ve fişleri
15. Sigorta kutusu
16. Elektrik anahtarı
17. elektrik kablosu fişi .

Fonksiyon & Etkinlik

Fonksiyon:

Dikey olarak hareket edebilen, koltuk arkasında yukarı ve aşağı doğru hareket edebilen, dört tekerlekten hareketli sessiz masaj yapan ellerden oluşan bir sete sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Shiatsu, yoğurma, çarpma, vurma ve senkronize yoğurma & çarpma ve

titreştirmeden oluşan altı adet benzer masaj yöntemiyle programlanmıştır.

Tasarımına özel otomatik masaj fonksiyonu: rahatlama gevşeme sağlamlık dinlenme

Bu fonksiyon, 5 hız seviyesiyle vücudun üst kısmı için bütün, sabit ya da kısmi bir alandan oluşan üç seçenekli manuel masaj sunmaktadır.

Çarpma shiatsu & vurma masaj modlarında, bu iki masaj eli arasındaki genişlik, geniş, orta ve dar olmak üzere üç seviyede ayarlanabilmektedir. Sabit konumdayken, pozisyonu tam anlamıyla sabitlemek için mekanizma yukarı ve aşağı doğru ayarlanabilmektedir. Üç hava basıncı modu ve iki şiddet seçeneği ile 33 hava yastığıyla donatılmıştır.

Sırtta ve kalçalarda, güçlü, zayıf ve kapalı olma üzere üç seçenekli vibrasyon masaj fonksiyonu bulunmaktadır.

Müzik ve ses ayarlama fonksiyonu: önceki ve sonraki şarkı seçimi.

Eşzamanlı müzikli masaj fonksiyonu: sırt kısmın vibrasyon yoğunluğu ve masaj hızı, kalça vibrasyon yoğunluğu düşük frekanstayken müziğin yüksek frekanslı kısımda olması şeklinde iniş çıkıştan oluşmaktadır. Bu durumda ses kablolu kontrol cihazıyla ayarlanabilmektedir.

Otomatik kaldırma fonksiyonu: baldır desteği ve koltuk arkılığı elektrik tahrikli olarak kaldırılabilir ve sırasıyla ve eşzamanlı olarak yatırılabilir.

Arka destek ve baldır desteğinin mekanik el fonksiyonunun otomatik olarak eski haline gelmesi:

Aşağıya doğru meyil verilirken, bariyerle karşılaşmaya yönelik programlanmış baldır desteği ayırma fonksiyonu.

Manyetizma fonksiyonu: Hem baldır hem de ayak tabanı bölümünde 300 gaus'luk 8 adet mıknatıs bulunmaktadır.

Ayak tabanı ısıtma fonksiyonları

VFD kromatik ekran, MP3 çalar, kulaklıklar ve mini fincan tepsisiyle donatılmıştır.

Stil sahibi ve mükemmel bir şekle, lüks bir görünüme sahiptir rahat oturup yatarak masaj deneyimi sunar.

Etkinlikleri

Yorgunluğun giderilmesi

Kas yorgunluğunun giderilmesi için kan dolaşımının desteklenmesi

Gergin kasların gevşetilmesi

Sinir ağrılarının giderilmesi

Kas ağrılarının giderilmesi

Kullanım yöntemi


I fişini takınız

Switch position sketch map
Şemadaki anahtar pozisyonu

plug in sketch map
şemadaki fiş


II. koltuk arkalıđı ve ayak desteđinin aısını gerekli olduđu Őekilde deđiŐtiriniz (ltfen masaj esnasında bunu yapmayınız.)

Koltuk arkalıđı aısı ayarlaması

Backrest raise		Press this button and the backrest will raise slowly, loose the button and it will stop.
----------------	---	--

Koltuk arkalıđı kaldırma


Bu dđmeye bastıđınızda, koltuk arkalıđı yavaŐça ykselecektir, dđmeyi bıraktıđınızda da duracaktır.

Backrest fall		Press this button and the backrest will fall slowly, loose the button and it will stop.
---------------	---	---

Koltuk arkalıđı indirme


Bu dđmeye bastıđınızda koltuk arkalıđı yavaŐça inecektir, dđmeyi bıraktıđınızda da duracaktır.

Ayak desteđi aısı ayarlaması

Foot rest raise		press this button and the foot rest will raise, loose the button and it will stop.
-----------------	--	--

Ayak desteđi kaldırma


Bu dđmeye bastıđınızda, ayak desteđi ykselecektir, dđmeyi bıraktıđınızda da duracaktır.

Foot rest fall		press this button and the foot rest will fall, loose it and it will stop.
----------------	---	---

Ayak desteđi indirme


Bu dđmeye bastıđınızda ayak desteđi inecektir, dđmeyi bıraktıđınızda da duracaktır.

YatıŐ aısı ayarlaması:

lies button		press this button, the whole frame will incline backward, loos the button and it will stop
-------------	---	--

Yatırma dđmesi

Bu dđmeye bastıđınızda, komple koltuk geriye dođru yatacaktır, dđmeyi bıraktıđınızda da duracaktır.

Raise button		press this button, the whole frame will incline frontward, loos the button and it will stop
--------------	---	---

Kaldırma dđmesi

Bu dđmeye bastıđınızda btn koltuk ne dođru kalkacaktır, dđmeyi bıraktıđınızda da duracaktır.

III. masajın baŐlatılması

- o,1 Masajı baŐlatmak iin, kırmızı dđmeye basınız.
- o,2 st vcut masaj noktasını tespit ediniz ve sonrasında otomatik olarak omuz pozisyonunuzu tespit ediniz.
- o,3 Omuz pozisyonunuzun tespit edilmesinin ardından, omuz pozisyonu durumu ıŐıđı yanar ve bu arada [Di,Di,Di] Őeklinde bir ses duyulacaktır. Artık vcut Őeklinize gre ufak bir mesafe aralıđında omuz pozisyonunuzu ayarlamak iin yukarı ve aŐađı dđmelerine basabilirsiniz. 10 saniye iinde

omuz pozisyonunuzun deęişmemesi durumunda, cihaz otomatik olarak tüm vücut masajına başlayacaktır.

○,4 omuz pozisyonunu deęiştiriniz


Move the mechanism upward to reach the shoulder.

Move the mechanism downward to reach the shoulder.

Omza ulaşmak için mekanizmayı yukarı doğru hareket ettiriniz

Omza ulaşmak için mekanizmayı aşağı doğru hareket ettiriniz

Uygun omuz pozisyonu

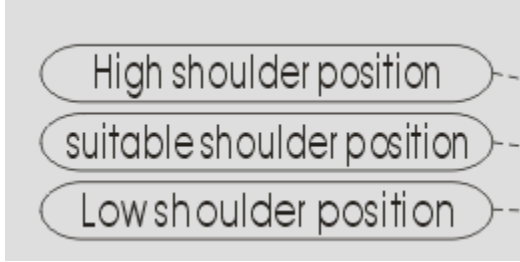

Yüksek omuz pozisyonu

Uygun omuz pozisyonu

Düşük omuz pozisyonu



Omuz ayarlama

○,5.Masajı başlatmak için fonksiyonel asaj düğmesine basınız

A) Hafıza fonksiyonlu masaj:

Omuz pozisyonu ayarlama durumundayken, hafıza fonksiyonu düğmeleri A,B,C, yanacaktır.

Bunlardan herhangi birine basınız, akabinde cihaz önceden kaydedildiği şekilde masajı yapacaktır.

Hafıza fonksiyonu düğmesi yanmaya devam edecektir.

PROGRAM MEMORY **A** **B** **C**

Program hafızası

B)Characteristic auto massage, auto upper body massage, auto lower body massage:

B) Karakteristik otomatik masaj, otomatik üst gövde masajı, otomatik alt gövde masajı

Name	Button	Massage	Massage feature	Display status
Adı	Düğme	Masaj	Masaj Özelliği	Ekran durumu

Karakteristik otomatik masaj

	Suitable massage	Relax	Auto 01
---	------------------	-------	---------


Uygu masaj

relaks

	Easy massage	Accelerate blood circulation	Auto 02
---	--------------	------------------------------	---------

Kolay masaj

Kan devranını arttırma

	Ache improving massage	Do deep massage to the shiatsu point so as to relax the ache part
---	------------------------	---

Ağrı iyileştirme masajı

Ağrıyan kısmı gevşetmek için shiatsu noktasına yoğun masaj yapınız.

	Fatigue recovering massage	Improve fatigue and make you rejuvenated
---	----------------------------	--

Yorgunlu giderme masajı


Yorgunluğu gideri ve yenilenmenizi sağlar

Otomatik masaj

	Neck & shoulder massage	Massage stress on the neck and shoulder
---	-------------------------	---


Boyun&omuz masajı

Boyun ve omuz üzerine masaj baskısı

	Back & waist massage	Massage stress on the back and waist
---	----------------------	--------------------------------------


Sırt&bel masajı

Sırt ve bel üzerine masaj baskısı

	up body	Focus on shoulder, back and waist massage
---	---------	---

Üsy vücut

Omuz, sırt ve bel masajına odaklanın

	Lower body air massage, two strength options	Massage stress on the foot, calf and buttock.
---	--	---

İki şiddet seçenekli,

Alt vücut hava masajı

ayak, baldır ve kalça üzerinde masaj baskısı

c). Manuel üst vücut masajı, manuel alt vücut masajı

Yöntem

Function	Button	Display status	Adjust massage balls
Fonksiyon	Düğme	Ekran durumu	Masaj toplarını ayarlayınız

Shiatsu 		Speed, Width, Strength
---	---	------------------------

Shiatsu

hız, genişlik, şiddet

Kneading 		Speed, Strength
--	---	-----------------

Yoğurma

Hız, şiddet

Flapping 		Speed, Width, Strength
--	---	------------------------

Çarpma

Hız, genişlik, şiddet

Flapping 		Speed, Width, Strength
--	---	------------------------

Çarpma

Hız, genişlik, şiddet

Kneading & Flapping 		Speed, Strength
---	---	-----------------

Yoğurma&çarpma

hız, şiddet

Knocking 		Speed, Width, Strength
--	---	------------------------

Vurma

Hız, genişlik, şiddet

Speed	SPEED	Speed  5 speed options available
-------	--------------	---

Hız

5 hız seçeneği bulunmaktadır

Width	WIDTH	Width  3 width options available
-------	--------------	---

genişlik

3 genişlik seçeneği bulunmaktadır

Koltuk arkılığı uzaması

Fixed position (fixed) massage

Small area(partial) trip massage

Upper body(overall) trip massage

Sabit pozisyon (sabit) masajı
Ufak alan (kısmi) trip masajı
Üst vücut (bütün) trip masajı
Arkalık uzaması

Button	Display status	Adjust massage balls
Düğme	Ekran durumu	masaj toplarını ayarlayınız

Fonksiyon: Masaj pozisyonu ayarlama (sabit ve kısmi modlarda masaj pozisyonu ayarlanabilmektedir)

Mechanism up
Mechanism down

Mekanizma yukarı
Mekanizma aşağı

Hava basınçlı manuel alt gövde masajı:

Function	Button	Display status	Features
Fonksiyon	düğme	Ekran durumu	Özellikleri


Lower body	LOWER	Lower body air pressure massage	2 strength options available
Alt vücut		hava basınçlı alt vücut masajı	2 şiddet seçeneği bulunmaktadır

Feet	FOOT	Only foot & calf air pressure massage	2 strength options available
Ayak		Hava basınçlı yalnız ayak& baldır masajı	2 şiddet seçeneği bulunmaktadır


Feet	FOOT	Only foot & calf air pressure massage	2 strength options available
Ayak		Hava basınçlı yalnız ayak & baldır masajı	2 şiddet seçeneği bulunmaktadır
Buttocks	BUTTOCKS	Only buttocks air pressure massage	2 strength options available
Kalçalar		Hava basınçlı yalnız kalça masajı	2 şiddet seçeneği bulunmaktadır

Function Button Display status

Fonksiyon düğme Ekran durumu

Air pressure	INTENSITY	Lower body air pressure strength choice, two strengths available.	
Hava basıncı		Alt vücut, hava basıncı şiddeti seçimi, iki şiddet bulunmaktadır	


Function	Button	Display status	Features
Fonksiyon	düğme	Ekran durumu	Özellikleri

Sole heating		Sole infrared heating, the temperature can reach 40 degrees 3 minutes after turning it on
--------------	---	---

Ayak tabanı ısıtma Kızıl ötesi ayak tabanı ısıtması, sıcaklık sistem açıldıktan 3 dakika sonra 40 dereceye ulaşabilmektedir.

Function	Button	Display status	Features
Fonksiyon düğmesi		Ekran durumu	Özellikleri

Müzik

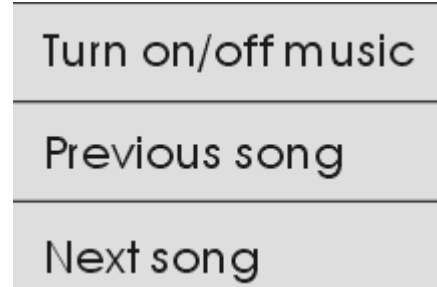

Müziği açınız/kapatınız

Önceki şarkı

Sonraki şarkı


Senkronize müzik ve masaj: mekanizmanın masaj hızı ve titreşim şiddeti, müzik hızı ve şiddetindeki değişikliklerle birlikte değişmektedir.

IV. Enerjinin kapatılması ve masajın durdurulması

○,1. Masaj boyunca, tüm masaj fonksiyonlarını durdurmak için kırmızı elektrik düğmesine basınız, aralık ve ayak desteği otomatik olarak orijinal konumuna geri dönecektir.

○,2. Hafıza fonksiyon düğmeleri A, B, ve C yanacaktır, sonrasında bitirmeden önce masaj durumunun kaydını almak için üçünden herhangi birine basınız, cihaz kontrol cihazı ekranında gösterecektir (hafıza ayarlama). Ya da tüm masaj fonksiyonlarını durdurmak için kırmızı elektrik düğmesine basınız, akabinde mekanizma eski haline dönecektir. Ya da 10 saniye bekleyiniz, otomatik olarak duracak ve mekanizma eski haline dönecektir.

○,3 elektriği kesiniz

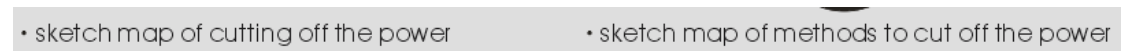

Elektriği kesme şeması

elektrik kesme yöntemleri şeması

4.yastıklama ve arka minder montajı ile yastığın boyun& omuz yoğunluğunu azaltabilen minderi kullanan masaj işlemi, yastıklı minder kullanıp kullanmama talebinize göre tespit edilebilmektedir (yastıklı minder kullanılması tavsiye edilmektedir).

Minderlerin arka kısmı fermuarla bağlanmaktadır.

5. Kontrol cihazının ve masa tepsisinin kurulumu ve kullanımı

(1) Masaj koltuğu üzerine kontrol cihazı rafını takınız. (2) Kontrol cihazı baştan ayağa doğru 180 derece dönebilmektedir. (3) Kontrol cihazı 360 derece kumanda edilebilmekte ve dönebilmektedir.

6. mp3 müzik nasıl indirilir:

- 1) Masaj koltuğunun elektriğini kapatınız
- 2) U-diski mp3 çalardan çıkarınız
- 3) Kişisel Bilgisayarın USB yuvasına u-diski takınız(windows xp, windows 2000,windows nt)
- 4) U-disk içine beğendiğiniz MP3 formatında müziği indiriniz. Eğer olmazsa öncelikle disk formatlayınız.
- 5) İndirme işlemini bitirdikten sonra PC üzerindeki USB yığın bellek cihazının siliniz
- 6) PC U-diski PC den çıkarınız
- 7) U-diski MP3 çaların USB yuvasına takınız.
- 8) Şimdi MP3 müziği yenilenmiştir, masaj koltuğunu açık konuma getirebilirsiniz.

Not:

- 1) MP3 müziği çalmaması durumunda, indirme işlemi öncesinde U-diski formatlayınız. Sonrasında, U-diski MP3 çalar USB yuvasına takmak için talimatları izleyiniz.
- 2) U-disk dışından MP3 çaları çıkarmayınız ya da gevşetmeyiniz.

7.Koltuk nasıl hareket ettirilir

Mobilya tekeri üzerine doğru koltuk ağırlık merkeziyle birlikte uygun bir açıyla koltuğu arkaya doğru yatırmadan önce kabloların önünüzde olmadığından emin olunuz. Sonrasında istediğiniz şekilde koltuğu ileri ay da geri doğru çekiniz.

Model : SAVINO

Adı : Lüks Masaj Koltuğu

Malzeme tanıtımı : PVC , PA , Çelik parçalar ve elektrikli & elektronik parçalar

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD
	MALZEME	PU	DERİ KUMAŞ	AHŞAP

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE
KULLANMANIZI DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr 'ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.